


# Pompe HYBRID chimie RC 6

Lien vers le site web

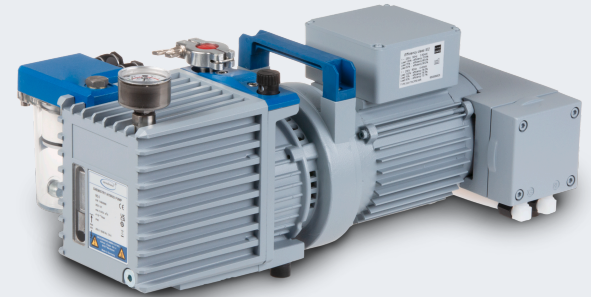

## Description du produit

La pompe Hybride Chimie RC 6 est la combinaison d'une pompe à palettes lubrifiées bi-étagée et d'une pompe à membrane "chimie", optimisée contre la corrosion. La pompe à membrane maintient sous vide en permanence le carter d'huile et permet dans ces conditions de pression et de température d'empêcher la condensation dans les parties lubrifiées d'un grand nombre de vapeurs corrosives.

## Caractéristiques

- forte diminution du risque de corrosion en travaillant avec des vapeurs agressives
- diminution la consommation d'huile en rallongeant les intervalles de vidange et de maintenance
- solution économique : en pratique un piège à froid devient souvent superflu
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique

## Référence de commande

Désignation	Tension   fréquence nominales	Type de fiche secteur	Référence
RC 6	230 V   50-60 Hz	CEE	20798560
RC 6	230 V   50-60 Hz	CH, CN	20798561
RC 6	230 V   50-60 Hz	UK, IN	20798562
RC 6	100-120 V   50-60 Hz	US	20798563
RC 6	230 V   50-60 Hz	CEE/CN	20798566

## Livraison

Pompe montée, prête à l'emploi après remplissage d'huile (flacon huile 0,5 l livré) avec mode d'emploi


## Accessoires

- Tuyau PTFE (antistatique) à petites brides KF DN 16 (20686031)
- Tuyau inox flexible à petites brides KF DN 16 (20673336)
- Kit groupe de pompage (sans pompe) PC 8 (20699949)
- RC (20640187)
- Kit de régulation du vide fin VACUU-SELECT + VACUU-VIEW extended, KF DN 16 (20700100)
- Kit de régulation du vide fin VACUU-SELECT + VSP 3000, KF DN 16 (20700101)
- Tuyau à vide caoutchouc DN 8 mm (20686001)
- Petite bride à embout KF DN 16 / DN 10 mm (20662806)
- Kit d'entretien RC 6 (20649990)


## Caractéristiques techniques

Débit maximale 50 Hz (mbar)	5.9 m <sup>3</sup> /h
Débit maximale 60 Hz (cfm)	4.1 cfm
Vide limite	2 x 10 <sup>-3</sup> mbar / 1.5 x 10 <sup>-3</sup> torr
Vide limite avec lest d'air	1 x 10 <sup>-2</sup> mbar / 0.75 x 10 <sup>-2</sup> torr
Pression partielle finale sans lest d'air	4 x 10 <sup>-4</sup> mbar / 3 x 10 <sup>-4</sup> torr
Compatibilité à la vapeur d'eau	>> 40 mbar / >> 30 torr
Nombre de cylindres	2
Nombre de d'étages	2 + 2
Température ambiante maxi admissible (service)	12 - 40 °C
Température ambiante maxi admissible (stockage)	-10 - 60 °C
Pression max. à l'échappement (abs.)	1.1 bar
Vol. d'huile min./max.	0.34 / 0.50 l
Raccord côté aspiration	Petite bride KF DN 16
Raccord côté pression	Embout DN 8-10 mm
Puissance nominale du moteur	0.3 kW
Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz	1500/1800 min <sup>-1</sup>
Classe de protection IP selon IEC 60529	IP 40
Dimensions (L x P x H)	526 mm x 302 mm x 226 mm
Poids	25 kg
Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/ 62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®)	50 dBA
Certification NRTL	Non


Courbe débit à 50 Hz

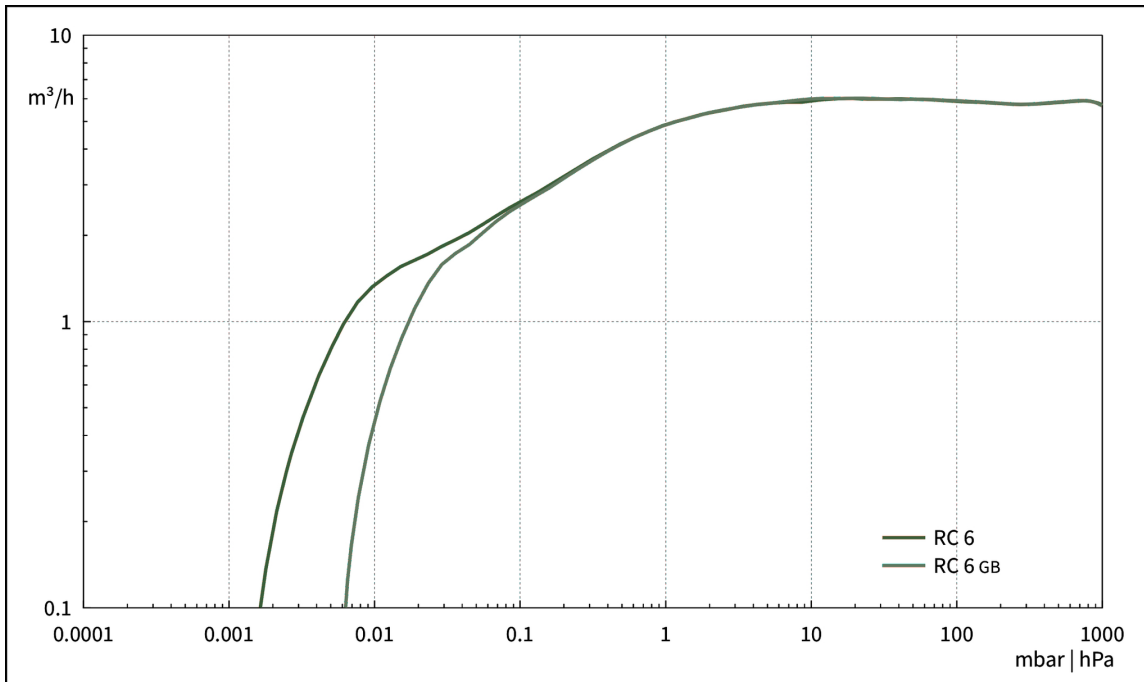


Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

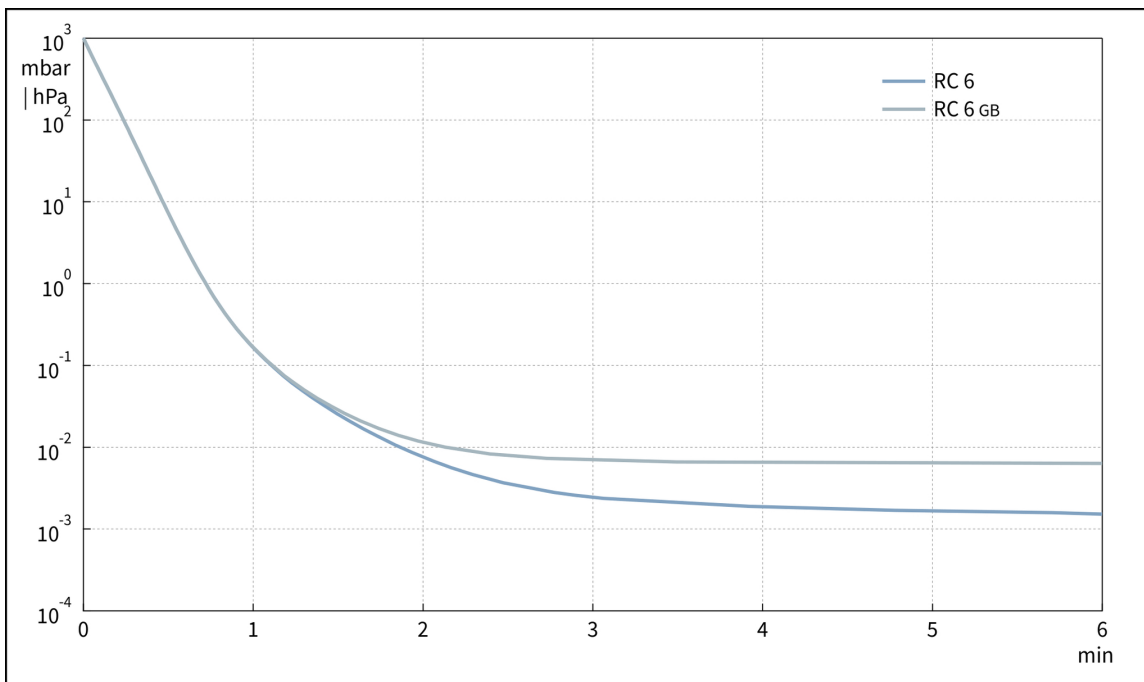



Courbe de débit à 60 Hz

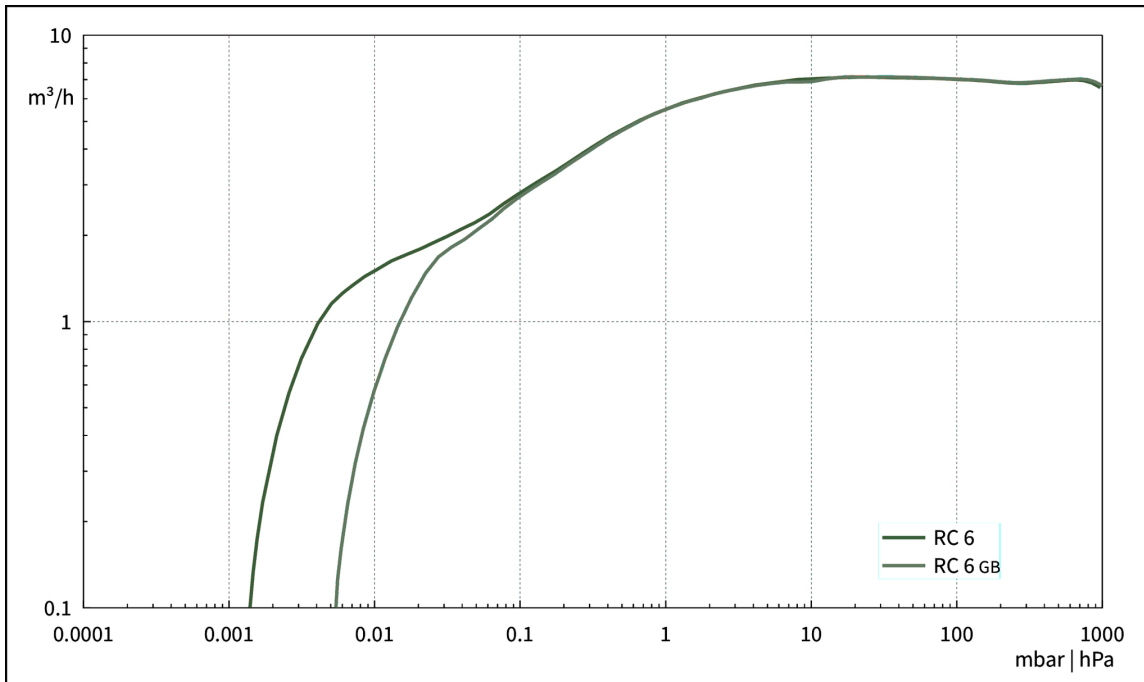

Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

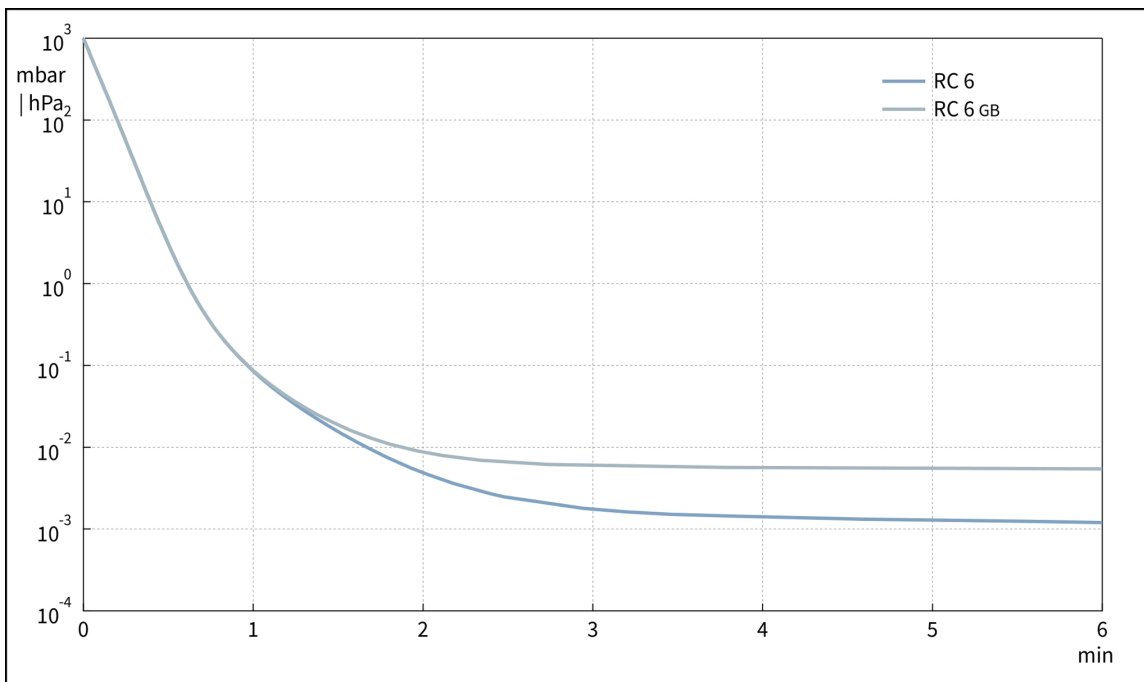

## Plan de masse

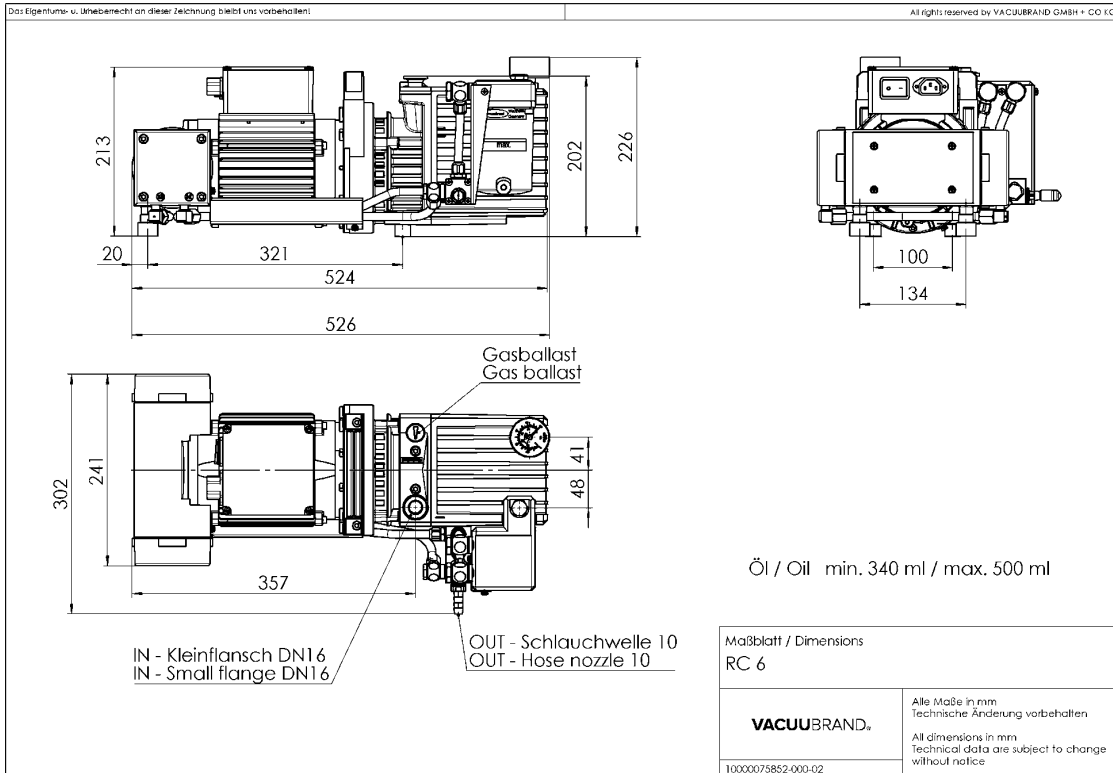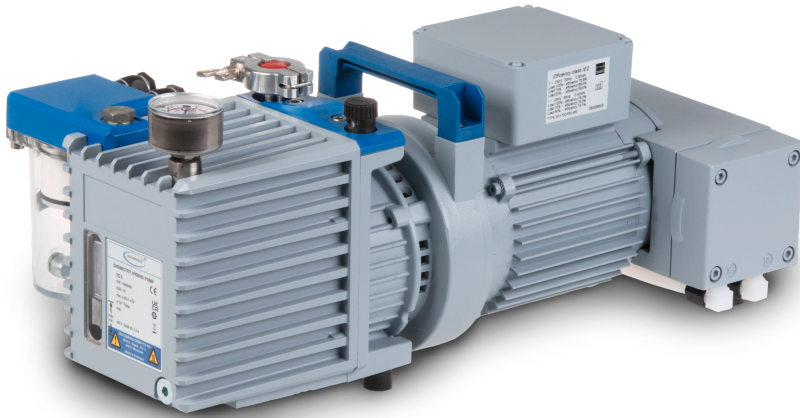

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com