

# Pompe à palettes RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended

[Lien vers le site web](#)



## Description du produit

Ces puissantes pompes à palettes sont excellentes en termes de compacité et de légèreté. Elles sont idéales pour les applications en laboratoire et en production nécessitant un très bon vide limite et un débit de gaz moyen ou élevé. La pompe à palettes biétagée RZ 6 est également disponible comme ensemble complet avec séparateur de brouillard FO, vanne VS 16, vacuomètre VACUU·VIEW extended.

## Caractéristiques

- débit élevé, même à proximité du vide limite
- grande compatibilité à la vapeur d'eau grâce à un lest d'air efficace ; le vide limite reste très bon même avec lest d'air
- étanche sous vide sans vanne à l'aspiration
- intervalles de vidange plus longs grâce à un grand volume utile d'huile
- maintenance aisée grâce à la construction télescopique

## Référence de commande

Désignation	Tension   fréquence nominales	Type de fiche secteur	Référence
RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU-VIEW extended	230 V   50-60 Hz	CEE	20798160

## Livraison

Ensemble complet avec pompe RZ 6, livré monté, avec charge d'huile et mode d'emploi. Avec filtre à huile FO, pièce en T, vanne VS 16 et vacuomètre VACUU-VIEW extended.


## Accessoires

- Tuyau à vide caoutchouc DN 10 mm (20686002)
- Tuyau inox flexible à petites brides KF DN 16 (20673336)
- Séparateur AK for RE/RZ 5/6/2.5 (20698006)


## Caractéristiques techniques

Débit maximale 50 Hz (mbar)	5.7 m <sup>3</sup> /h
Débit maximale 60 Hz (cfm)	4.0 cfm
Vide limite	2 x 10 <sup>-3</sup> mbar / 1.5 x 10 <sup>-3</sup> torr
Vide limite avec lest d'air	1 x 10 <sup>-2</sup> mbar / 0.75 x 10 <sup>-2</sup> torr
Pression partielle finale sans lest d'air	4 x 10 <sup>-4</sup> mbar / 3 x 10 <sup>-4</sup> torr
Compatibilité à la vapeur d'eau	40 mbar / 30 torr
Nombre de d'étages	2
Type d'affichage / de contrôleur de vide	VACUU-VIEW extended
Température ambiante maxi admissible (service)	12 - 40 °C
Température ambiante maxi admissible (stockage)	-10 - 60 °C
Pression max. à l'échappement (abs.)	1.1 bar
Vol. d'huile min./max.	0.34 / 0.73 l
Raccord côté aspiration	Petite bride KF DN 16 / embout DN 10 mm
Raccord côté pression	Embout DN 8-10 mm
Puissance nominale du moteur	0.18 kW
Vitesse de rotation nominale 50/60 Hz	1500/1800 min <sup>-1</sup>
Classe de protection IP selon IEC 60529	IP 40
Dimensions (L x P x H)	420 mm x 230 mm x 240 mm
Poids	17.8 kg
Bruit (niveau de pression acoustique) en dBA à 50 Hz ou 1500 tr/min/ 62% (VARIO)/1500 tr/min (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU-PURE®)	50 dBA
Certification NRTL	Non


Courbe débit à 50 Hz

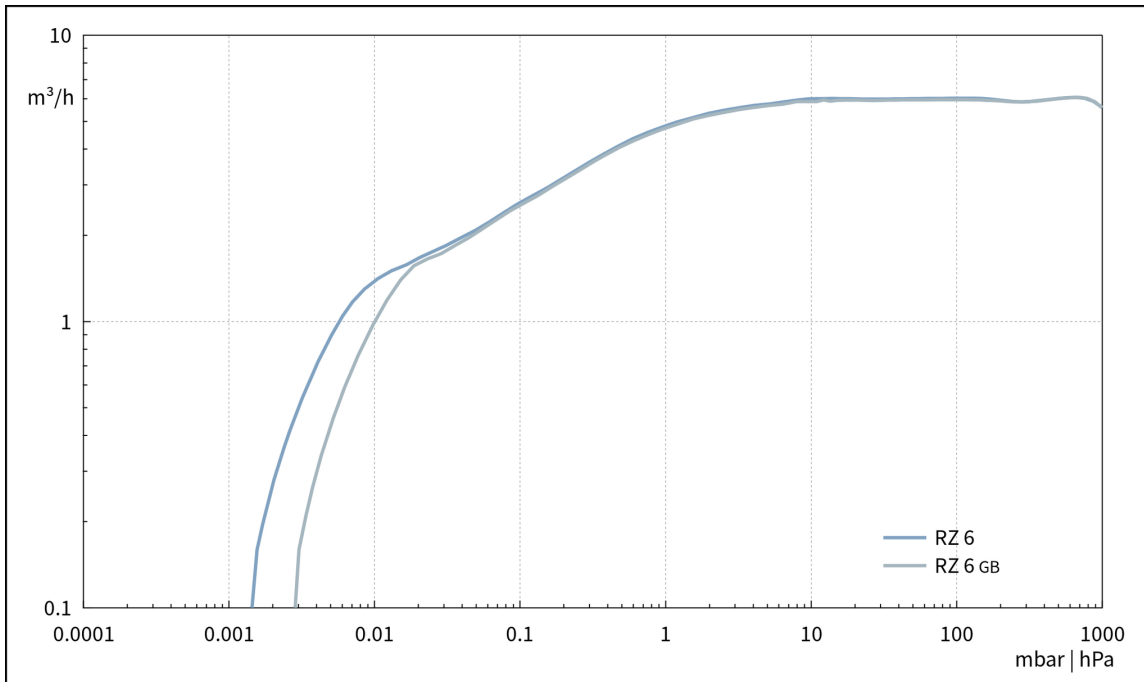


Courbe de pompage à 50 Hz (réservoir 10 l)

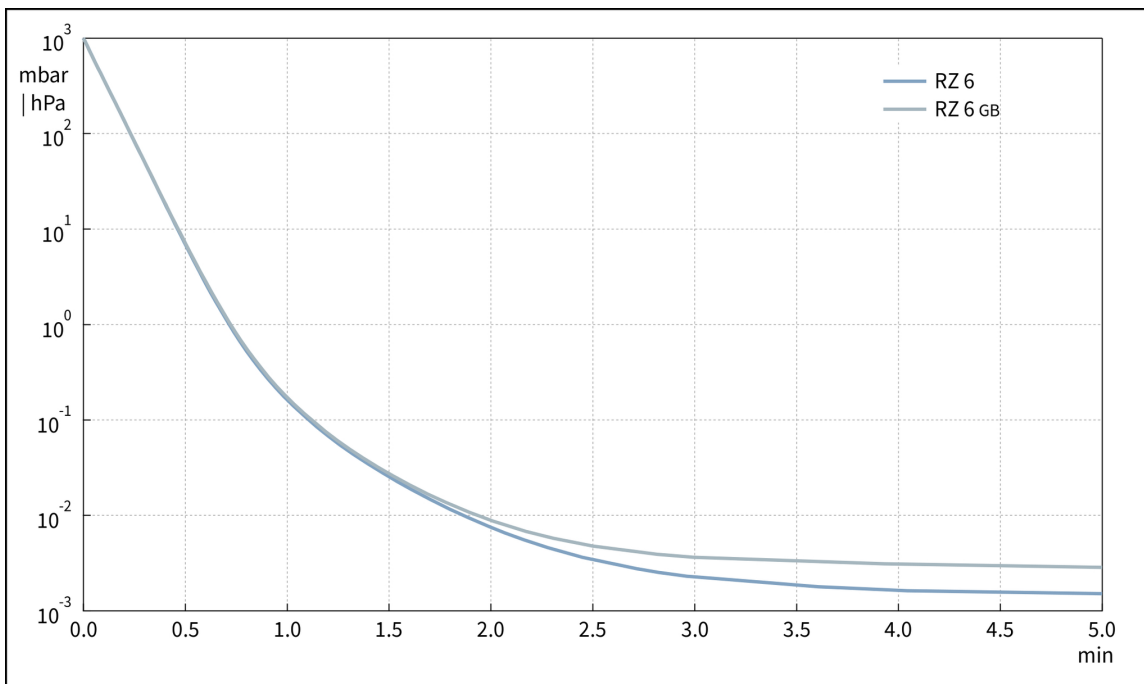


Courbe de débit à 60 Hz

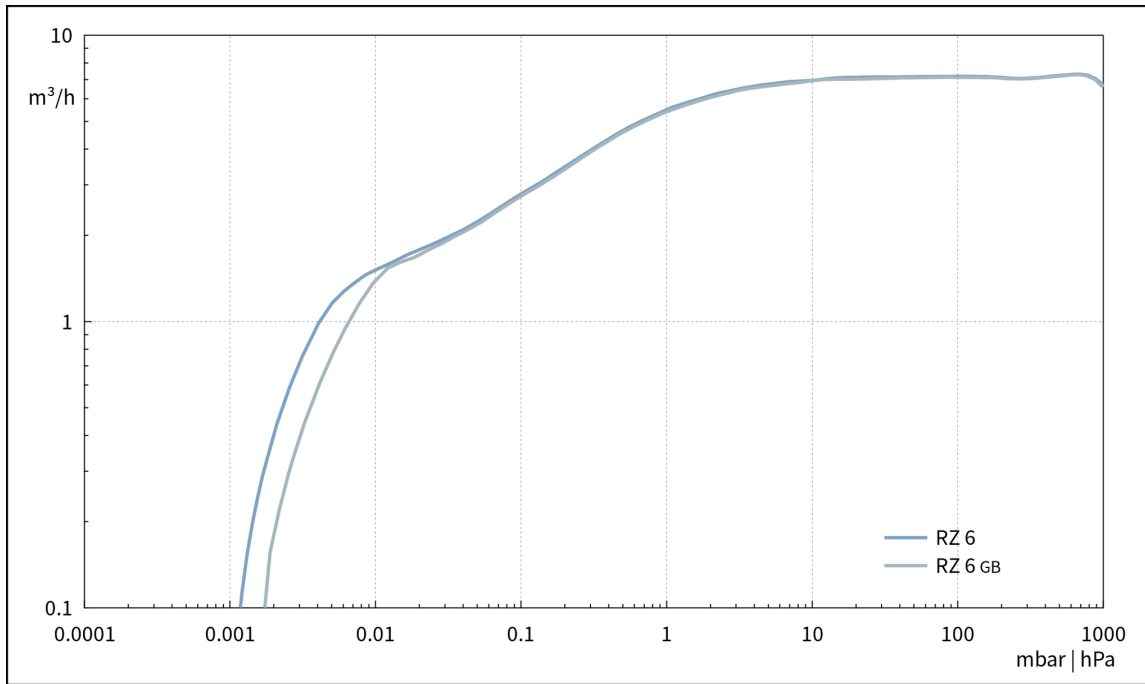

Courbe de pompage à 60 Hz (réservoir 10 l)

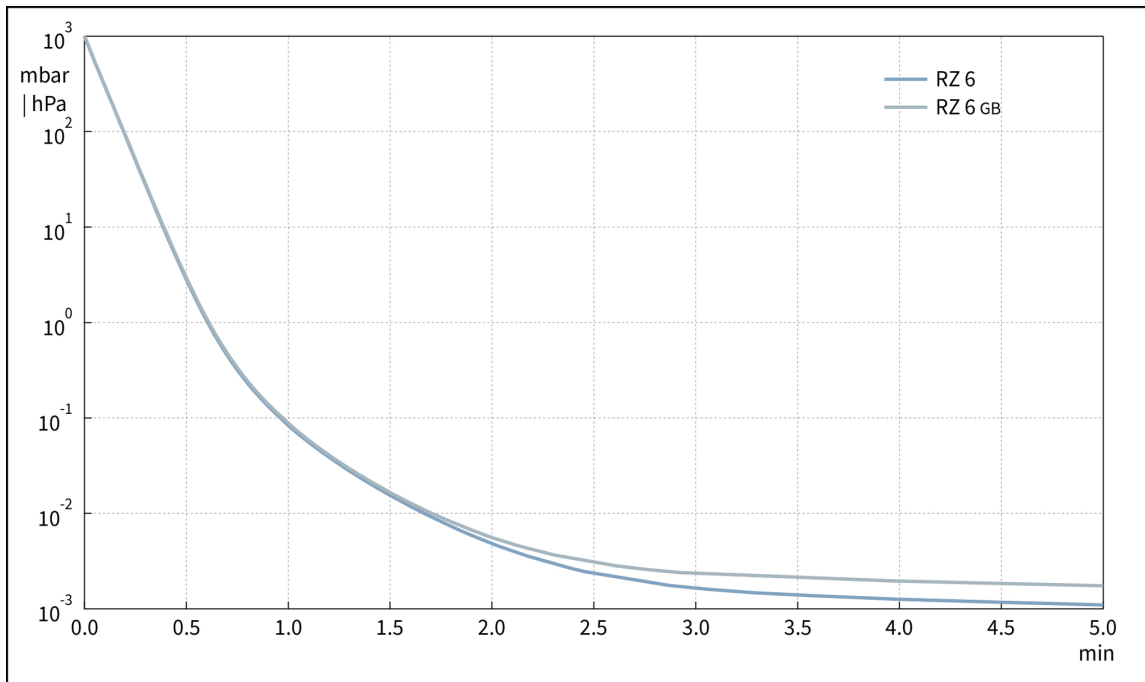

## Plan de masse

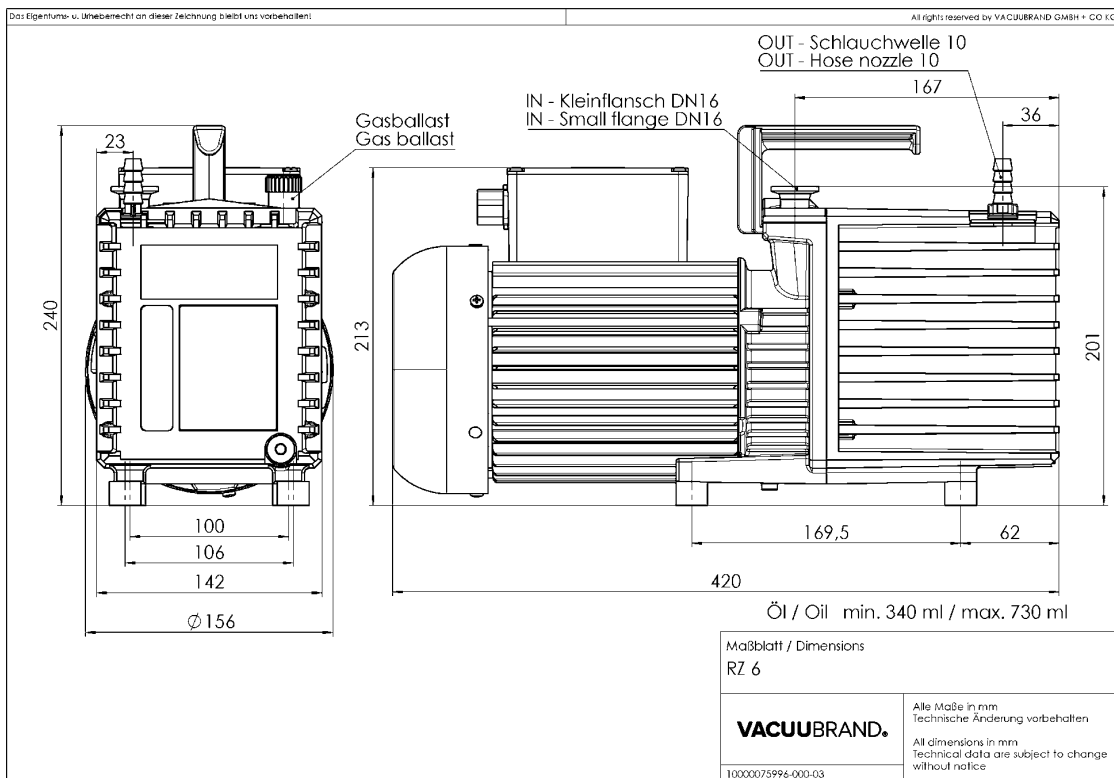

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
P.O. Box 1664  
97877 Wertheim  
T +49 9342 808 5550  
F +49 9342 808 5555

info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

**VACUUBRAND®**

VACUUBRAND is part of the Brand group, a manufacturer of high-quality and innovative laboratory equipment and vacuum technology with a global team of approx. 1,000 employees.

With highly motivated and qualified employees, we manufacture the world's most comprehensive product family for vacuum generation, measurement and control for the rough and fine vacuum range in the laboratory.

**All with one goal:**

Enabling our customers to run reliable, safe and efficient processes. This is why we commit ourselves to continuous innovation, first-class performance, and outstanding quality.

Engineering excellence is central to our ability to deliver products and solutions renowned for their quality, durability, and reliability. Innovative technology, high quality materials and extensive testing deliver unmatched performance - engineered and manufactured in Germany.

Together with you, our experts will find the best solution for your application and provide you with first-class service along the way.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com